



3N Kozmetik
Medikal

ULVERIN^R

"Cildiniz için altın dokunuş"

MİKRO ALTIN İĞNELİ ÖRÜMCEK AĞI ETKİLİ VAKUMLU FRAKSİYONEL RADYOFREKANS



SÜRDÜRÜLEBİLİR TEKNOLOJİ GELİŞİMİ

Medikal alanda uzun yıllardır kullanılan **ULVERİN R** Radyofrekans yöntemi; cilt ve kozmetoloji alanında uzun süre başarıyla kullanılmaktadır. Her geçen gün gelişen teknoloji bu yöntemin oldukça gelişmesini sağlamıştır. Bu durum klasik Radyofrekans metoduna yeni özellikler eklenmesi ile de çok etkili bir yöntem olarak ortaya çıkmıştır.

YENİLİK- 1 FRAKSİYONEL ÖZEL TASARIM

İlk olarak Radyofrekans yöntemi Fraksiyonel hale getirilmiştir. Bu teknikte uygulanacak güç bir bütün halinde değil, yan yana birçok küçük noktadan cilde nüfus etmektedir. Bu sayede arada kalan sağlam dokular sayesinde hasarın çok daha az olması sağlamıştır.

İkinci kuşak radyofrekans cihazları olan "fraksiyonel radyofrekans" daha çok bilinen adı ile Thermage (termaj) cihazımız piyasada yerini almıştır. Halen geniş kullanım alanı bulunan Radyofrekans cihazı olan termajda derinin tüm katmanları etkilenmektedir.

YENİLİK- 2 ALTIN MİKRO - İĞNELER

Bu aşamadan sonra eklenen ikinci yenilik ise mikro -iğneler ile cildin doğrudan içine enerji akımını veren üçüncü kuşak Radyofrekans cihazlarıdır.

Mikro-iğneler ile donatılmış olan Radyofrekans cihazının akım çıkışı sağlayan ünitesi derinin üst tabakası olan epidermisi atlayıp, dermis denen orta tabakaya ulaşmaktadır. Kullanılan iğnelerin derinlikleri cihaz üzerinden 0.5 ile 3.0 mm arasında ayarlanabilmektedir. Bu teknolojiye kullanılan iğneler altından yapıldığı için bu yöntem "altın iğne" olarak ta anılmaktadır.

Bu yöntem de yapılan bir yeni diğer aşama ise akımın tüm iğne boyunca değil, yalnızca iğnenin ucundan verilmesidir. Böylece çok daha az hasar ile çok daha güzel sonuçlar alınmaktadır.

AZ
ORTA
DERİN



YENİLİK- 3 PATENTLİ SPİDER WEB RF


ULVERİN R Fraksiyonel RF cihazımızda tüm bu yeniliklerin yanı sıra birde patentli teknolojisi olarak tıpkı bir örümcek ağı gibi iğne uçlarının aralarında RF vermesi sağlanmıştır. Bu şekilde etki çok daha fazla arttırılmıştır.

Ayrıca başlık ucuna eklenmiş olan Vakumlama teknolojisi sayesinde cilt tamimiyle başlığa sabitlenir ve tüm iğneler eşit oranda ve hızda temas eder. Bu sayede acı minimum ama etki maksimumdur.

Radyofrekans enerjisinin altın iğneler ile doğrudan dermis tabakası içine aktarılması sonucu burada oluşan koagülasyon ile kolajen liflerinde hızlı bir parçalanma sağlanır. Bunun sonucu yeniden organize olan lifler kısa bir süre içinde kasılmayı, toparlanmayı sağlayacak şekle gelirler. Fibroblast hücrelerinin uyarılması ile de yeni kolajen üretimi başlatılır.

Fraksiyonel Radyofrekans uygulamasının kullanım alanları;


- Cilt kırışıklıklarının tedavisi Cilt yenilenmesi ve kalitesinin arttırılması
- Yüz, boyun, dekolte bölgesi sarkmaları Yara izi (skar) tedavisi
- Sivilce izlerinin tedavisi
- Cilt lekelerinin tedavisinde
- Gebelik çatlaklarının tedavisi
- Kilo alıp verme gibi çeşitli nedenlere bağlı oluşan çatlakların tedavisi
- Kol ve bacaklardaki sarkmaların tedavisi
- Gözeneklerin sıkıştırılması

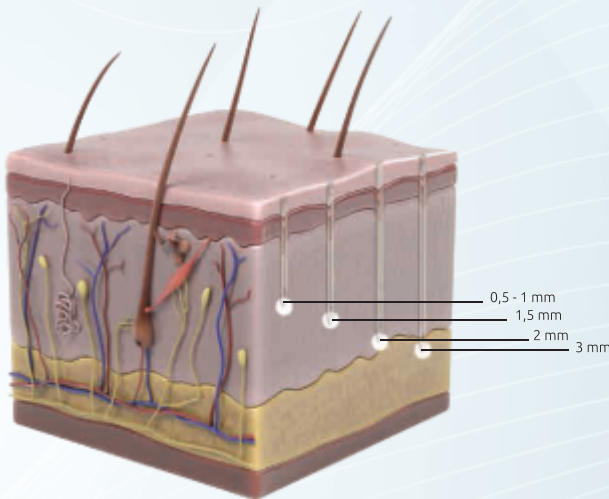

İYİLEŞME SÜRECİ




ÖNCESİ

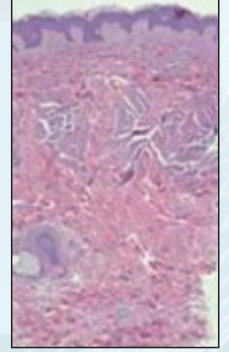


2 GÜN SONRASI




14 GÜN SONRASI

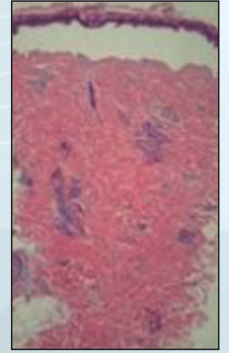


28 GÜN SONRASI

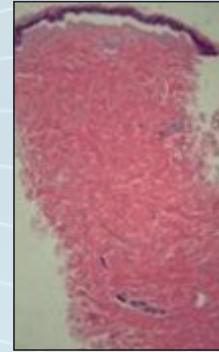


70 GÜN SONRASI

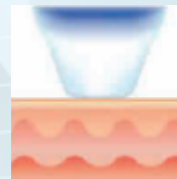


Mikro-iğne taşıdığı cilt yüzeyine yerleştirilir.

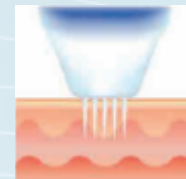

Mikro-iğneler cildin içine nüfus eder.

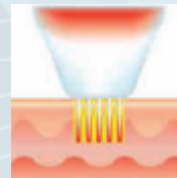

Bipolar RF enerjisi hedeflenen bölgeye doğrudan uygulanır

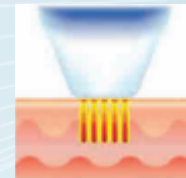

Kolojen yenilenme ve yeni elastik üretim işlemi başlar

TEKNİK ÖZELLİKLER



ÜRÜN İSMİ	ALLURA VI
RF GÜCÜ	80 W
VAKUM SÜRESİ	50 - 950 ms
ATIŞ ARALIĞI	1 - 3 Saniye
VAKUM GÜCÜ	Off - Soft - Normal
DERİNLİK	0.5 - 3.00 mm
FREKANS	1 MHZ, Bipolar
VOLT	220V - 50/60 Hz

TREATMENT EFFECT



CLINICAL RESULT



PORE TREATMENT

When radio frequency stimulates sebaceous glands, it causes change in affected layer with new connective tissue and tightened pores as the result on the leftside.



SKIN RESILIENCE TREATMENT

Micro needle RF stimulates poor skin to generate collagen and elastic fibers inside of skin. So, it is perfect for giving resilience to inner skin and for improving wrinkles.

