





3N Kozmetik
Medikal

I-VAC

ODAKLI NANO KAVİTASYON VE VELLA SHAPE (RADYOFREKANS, INFRARED, VAKUM ve ROLLER MASAJ) TEK CİHAZDA!

ODAKLI NANO KAVİTASYON, VELLA SHAPE RADYOFREKANS, INFRARED, VAKUM ve ROLLER MASAJ

- ✓ Selülit Tedavisi
- ✓ Bölgesel Zayıflama
- ✓ Vücut Şekillendirme
- ✓ Kolajen Arttırımı
- ✓ Ameliyatsız Yüz Şekillendirme
- ✓ Ameliyatsız Kol Germe İşlemi
- ✓ Yüz Lifting
- ✓ Ameliyatsız Boyun ve Dekolte germe işlemi

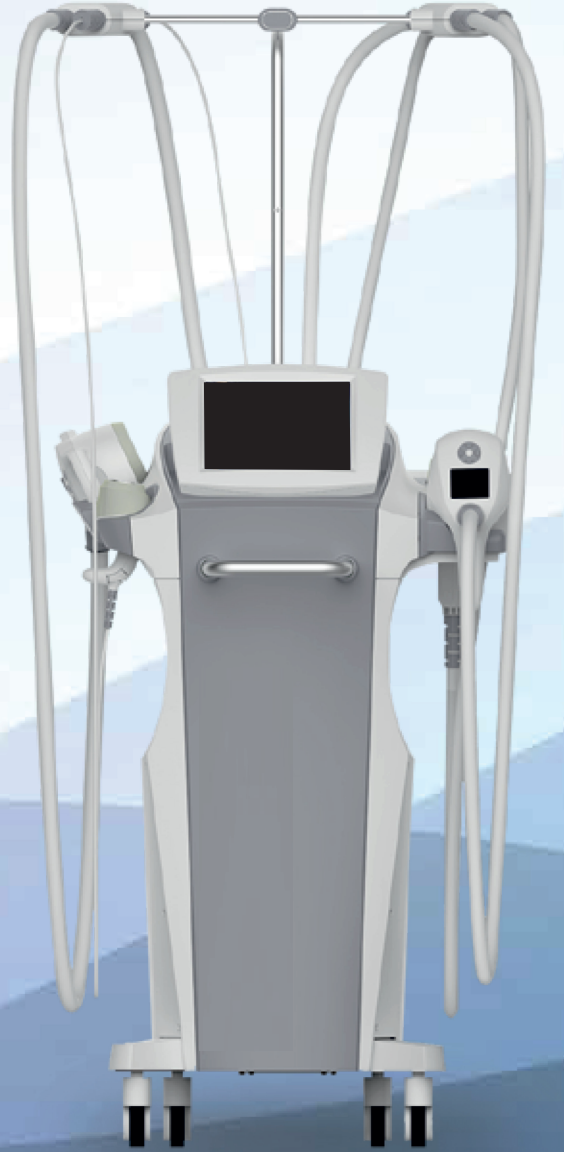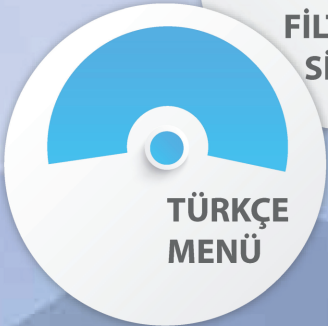

EN ETKİLİ VE GÜVENLİ
NON-İNVAZİV TEKNOLOJİ





3N Kozmetik
Medikal

ODAKLI NANO KAVİTASYON

I- VAC markası patentli teknolojisi vakum destekli ODAKLI NANO KAVİTASYON, standart kavitasyon teknolojilerinden 2 kat daha güçlü ve 10 kat daha zararsız bir teknolojidir. Kavitasyon; cerrahi olmayan, bölgesel zayıflama ve selülit tedavisinde kullanılan yağları parçalamada çok etkili bir sistemdir. Kavitasyonda ultrason (düşük frekans ses dalgaları) kullanılmaktadır. Cildin dış yüzeyine uygulanan bu ses dalgaları, yağ dokusundaki hücre sıvısında ani ve yüksek basınç değişikliklerine neden olur. Bununla birlikte oluşan kabarcıklar önce genişleme, sonra patlama yaratır. Kavitasyon denilen bu etki; yağ hücrelerinin duvarlarını (zarını) tahrip ederek yağ hücrelerinin yapısını bozar. Bu dokudaki yağ hücreleri ve açığa çıkan yağ asitleri parçalanarak, lenf yolları sayesinde vücuttan uzaklaştırılmaya çalışılır. ODAKLI NANO KAVİTASYON eski kavitasyon sistemlerinden farklı olarak vakum teknolojisini ve çapraz atım teknolojisini beraber kullanır. Bu sayede uygulama yapılacak bölge vakumlanır, ses dalgaları sadece yağ olan bölgeye odaklanır, böylece enerji sadece sorunlu bölgelerde kullanılır. Bu sayede enerji hiçbir şekilde iç organlara veya istenmeyen bölgelere gitmeyerek sorunlu bölgede kalır. Ayrıca çapraz atış teknolojisinde çift başlıktan aynı bölgeye aynı anda uygulama yapıldığı için o bölgedeki tüm yağ hücrelerinde en yüksek sonuç görülür.



VELLA SHAPE RADYOFREKANS, INFRARED, VAKUM, ROLLER MASAJ

VELLA SHAPE

Radyofrekans, infrared, vakum ve roller masaj gibi dört sistemi bir arada barındıran bölgesel zayıflama ve selülit tedavisine yardımcı olan bir bölgesel inceleme cihazıdır.

I-VAC Vellashape Başlığı ile Ameliyatsız Bölgesel Zayıflama ve Selülit tedavisi Uygulaması

I- VAC VellaShape başlığı bölgesel inceleme teknolojilerini kombine şekilde kullanır. Enerji kaynağı olan vakum ile hedef bölge emilir, kızılötesi ışınlar uygulama yapılan bu bölgeyi ısıtır. Bu sistemle işlem yapılan bölge cilde zarar vermeden en hızlı şekilde ısıtılır. Gene başlıkta bulunan Bi Polar Radyofrekans enerjisi ile hedeflenen bu bölgeye enerji verilerek ısının eşit olarak yayılmasını sağlar. Bu enerji ile ortaya çıkan hedef bölgedeki ısı, yağ hücrelerini parçalar ve selülit görünümünün azalmasına da yardımcı olur.

Vakum teknolojisi ile desteklenen bu derin doku ısıtımı sayesinde, ciltteki kolajen ve elastin hücreleri uyarılır. Buda çok daha fazla kolajen ve elastin hücresi üretimi anlamına gelir. Böylece ciltte sıkılaşıma meydana gelir. Cildin sıkılaşması sonucu vücut silüetinin de inceleme sağlanırken, cildin kalitesinde de belirgin bir iyileşme meydana gelir.

I-VAC Vellashape başlığı ile Ameliyatsız Yüz Germe Uygulaması

Zaman içerisinde yıpranan, yaşlanma ya da hızlı kilo alıp verme ile deforme olan yüz bölgesini gerdirmek isteyen bireyler, hem yüzde iz kalma riski hem de ameliyat riski nedeni ile günümüzde cerrahi müdahaleler yaptırmaktan çekinmektedirler. Böyle bir durumda I-VAC VellaShape başlığı kullanımı en ideal teknolojilerden bir tanesidir. Vakum teknolojisi ile desteklenen bu derin doku ısıtımı sayesinde ciltteki kolajen ve elastin hücreleri uyarılır. Buda çok daha fazla kolajen ve elastin hücresi üretimi anlamına gelir. Böylece ciltte sıkılaşıma ve gerilme meydana gelir.


Bi-Polar Radyofrekansı ile yüz üzerinde gerginlik ve toplanma hissi yaratmayı amaçlayan bu teknolojiye, genellikle yüz gerdirme operasyonları 4-6 seans arasında etkili olmaktadır. Yüzde herhangi bir yaraya ya da çizgiye sebep olmayan bu teknoloji ile bireylerin cilt altındaki hücreleri canlandırılarak kendini yenilemesine yardımcı olunmakta ve derisinin de gerginleşmesine zemin hazırlanmaktadır.

I-VAC Vellashape ile Ameliyatsız Kol Germe İşlemi

I-VAC Vellashape başlığı kullanılan bir diğer bölge ise kollarıdır. Aşırı kilo alımı ya da verimi ile birlikte bireylerin kollarında deformasyon meydana gelmekte ve sarkmalar oluşmaktadır. Bu sarkmaları önlemek amacıyla kullanılan cihazda, kolların daha dinamik ve sıkı bir görüntü alması adına belirli seanslar düzenlenmektedir. Anti Aging cihazı olarak adlandırılan bu uygulamada kollarındaki selülit görüntüsünün de geçmesine yardımcı olunurken, oldukça az seans ile kolların daha sıkı görünmesine yardımcı olmaktadır. Yağ hücrelerine etki ederek, gerekli titreşimler ve radyo aktif dalgalar ile yağların parçalanmasını sağlar.

RADYOFREKANS

Radyofrekans ısı kontrollü zayıflama yöntemidir. Radyo dalgaları vücuttaki su molekülleri ile iyonlarını (sodyum - potasyum-kalsiyum-magnezyum) harekete geçirir. Bunların hareketlenmesine bağlı olarak enerji açığa çıkar ve uygulama bölgesi ısınır. Uygulama yapılan bölgenin ısı 42-45 dereceye çıkar. (normalde vücut ısı 36-37 derecedir). Cilt ısı bu noktaya geldiğinde, cilt altı bölgedeki ısı 51-56 dereceye tekabül eder. Bu ısı vücuda herhangi bir tahribat ya da zarar vermez. Ancak bu yüksek ısı 2-22 mm derinlikler arasındaki yağ hücrelerine ulaşır ve bu hücrelerin zarlarının etkilenmesini sağlar. Bu şekilde yağ hücrelerinde erime meydana gelir. Bu teknoloji ile su düzeyi çok yüksek olan yağ hücrelerine ulaşılabilir. Yani yağ dokusunu eritebilmektedir. Eriyen yağlar dolaşımın artmasına bağlı olarak kan ve lenf yolu ile emilir ve vücuttan atılır. Yaşlanmış ve

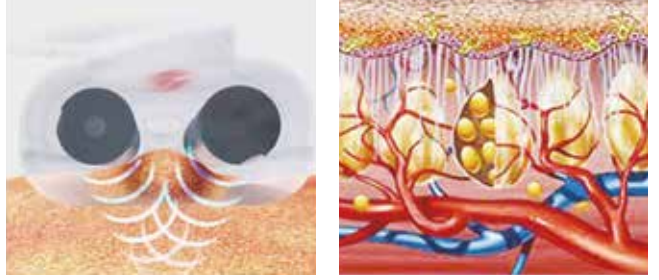



3N Kozmetik
Medikal

yıpranmış Kollajen doku parçalanır ve ölür. Bunların yerine vücut yeni kollajen üretimine başlar. Vücutta sıkılığı, gerginliği sağlayan dokuya bağ dokusu denir. Bu dokuyu oluşturan hücreler ise fibroblast hücreleridir. Oluşan ısı ile fibroblast aktivasyonu hızlanır. Yağların erimesi, kollajenlerin çoğalması ve bağ dokusunun yenilenmesi ile bölgesel inceltme, selülitlerin tedavisi, toparlanma, sarkıkların giderilmesi ve kırışıklıkların yok olması sağlanır.

INFRAKIRMIZI


Kızıl ötesi ışın dokuyu 2-10 mm derinliğe kadar ısıtır. Radyofrekans ile beraber kullanıldığında ısıyı arttırmaya yardımcıdır ve Radyofrekans işlemini destekler.

VAKUM

Vakum terapi, ters basınç ile yağları ayırır ve basınç uygulayarak dirençlerini kırar. Bu şekilde de yağ dokularında azalma ve gevşeme olur vücuttan atılmaları hızlanır. Özellikle Selülit tedavilerinde çok etkilidir. Vücut hatlarını şekillendirir, sıkılaşmayı sağlar, sarkmaları onarır ve kan dolaşımını hızlandırarak cilt güzelliğini sağlar, parçalanmış yağların dışa atılmasını destekler, kilo vermeye yardımcı olur.

ROLLER MEKANİK MASAJ

Mekanik masaj lenf drenajı sağlar (dermal ve hipodermal). Gerginleşmiş noktaları ve spazmları yatıştırmaya, ödemlerin ve yorgunluk sonrası kaslarda biriken laktik asitinin atılmasına yardımcı olur. Ritmik masaj ile kan dolaşımını hızlandırır; ciltte yaşlanma çizgilerini azaltır ve cilde esneklik sağlar. Özellikle bölgesel zayıflamada kullanılan ve hızla yaygınlaşan yöntemlerden biridir. Yapılan masaj sayesinde kan akışı hızlanır, damarlar açılır ve vücut toparlanır. Masaj tüm vücuda uygulanabilir ancak özellikle kalça, üst bacak, kol ve popo bölgelerinde, selülitle mücadele amaçlı daha etkili olarak kullanılır.

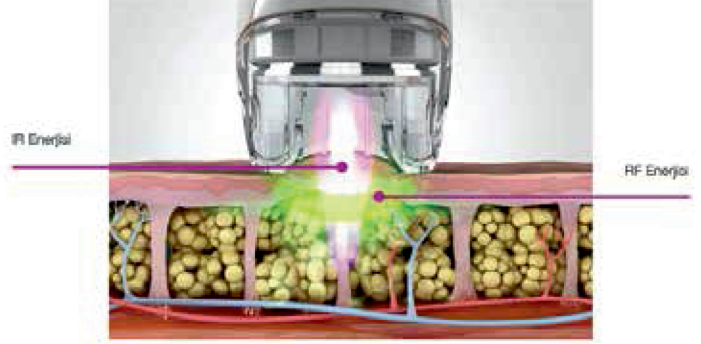

VÜCUT VAKUM ODAKLI NANO KAVİTASYON BAŞLIĞI

Patentli teknoloji ile üretilmiş rakipsiz başlık sayesinde bölgesel zayıflama ve selülit tedavisinde muhteşem sonuçlar alabilirsiniz. Başlık üzerinde LCD ekran ve kontrol tuşları mevcuttur. Bu sayede uygulama ayarlarını ve başlatıp durdurmayı hem cihaz hem de başlık üzerindeki ekrandan yapabilirsiniz. Karın, kalça ve basen uygulamaları için uygundur.

VÜCUT RADYOFREKANS, INFRARED, VAKUM, ROLLER MASAJ BÜYÜK BAŞLIĞI

Radyofrekans, infrared, vakum ve roller masaj gibi dört sistemi bir arada barındıran bölgesel zayıflama ve selülit tedavisine yardımcı olan çok özel büyük başlıktır. Vücutumuzun karın, kalça, basen ve sırt bölgeleri gibi geniş alanlar için uygundur. Başlık üzerinde LCD ekran ve kontrol tuşları mevcuttur. Bu sayede uygulama ayarlarını ve başlatıp durdurmayı hem cihaz hem de başlık üzerindeki ekrandan yapabilirsiniz. Cihazda bulunan özel filtre sistemi sayesinde ciltten emilen serbest radikaller, ölü hücreler ve yağ başlığa ve cihaza zarar vermeden bu filtrelerde toplanır. Özel kostüm giyilmesine ihtiyaç yoktur.

VÜCUT RADYOFREKANS, INFRARED, VAKUM, ROLLER MASAJ KÜÇÜK BAŞLIĞI

Radyofrekans, infrared, vakum ve roller masaj gibi dört sistemi bir arada barındıran bölgesel zayıflama ve selülit tedavisine yardımcı olan çok özel bir başlıktır. Vücutumuzun kol, omuz, alt bacak bölgeleri gibi dar alanlar için uygundur. Başlık üzerinde LCD ekran ve kontrol tuşları mevcuttur. Bu sayede uygulama ayarlarını ve başlatıp durdurmayı hem cihaz hem de başlık üzerindeki ekrandan yapabilirsiniz. Cihazda bulunan özel filtre sistemi sayesinde ciltten emilen serbest radikaller, ölü hücreler ve yağ başlığa ve cihaza zarar vermeden bu filtrelerde toplanır. Özel kostüm giyilmesine ihtiyaç yoktur.

YÜZ RF + VAKUM BAŞLIĞI

Radyofrekans ve vakum sistemini bir arada bulandıran değişebilen, 3 ayrı ucu bulunan özel bir başlıktır. Yüz bölgesinde lifting, kırışıklık tedavisi, göz kapağı sıkılaştırma ve göz çevresi kırışıklık tedavisi için kullanılır. Uygulama bölgesine göre başlık uçları mevcut olup kolayca değiştirilebilir.



VAKUM GÜCÜ:	10 Kpa - 90 Kpa (5.7 cmHG – 68,4 cmHG)
VAKUM ARALIĞI:	0,5 S – 7,5 S
ROLLER HIZI:	0-36 dev/dk
ROLLER ÇALIŞMA MOD:	2 Değişik Mod
ODAKLI NANO KAVİTASYON GÜCÜ:	2 x 60 W
ODAKLI NANO KAVİTASYON FREKANSI:	2 X 40 Khz
RADYOFREKANS GÜCÜ:	150 W'a kadar
INFRARED LED GÜCÜ:	3,6 W'a kadar
LAZER DALGA BOYU:	850 - 940 nm
VAKUM:	Aralıklı

KLİNİK VERİLER



Öncesi

Sonrası



Öncesi

Sonrası



Öncesi

Sonrası



Öncesi

Sonrası



Öncesi

Sonrası



Öncesi

Sonrası

