

ULF PLUS

VAKUM HIFU (YÜKSEK YOĞUNLUKLU ODAKLANMIŞ ULTRASON)

HIFU, epi-dermis, dermis, SMAS tabakasında cilt gençleştirmeyi ve subkutan tabakada selülit azaltmayı kolaylaştıran odaklanmış ultrason enerjisidir.

Termal koagülasyon noktası, amaçlanan derinlikte anında 60-80°'ye ulaşır. Enerji kendi kendini iyileştirme sürecine yol açar (4 aşama); koagülasyon - reaktif - rejenerasyon - yeniden şekillendirme

HIFU (YÜKSEK YOĞUNLUKLU ODAKLANMIŞ
ULTRASON)



VÜCUT TEDAVISI İÇİN 2MHZ HIFU




2MHz HIFU, ultrason enerjisinin daha kalın nesneye daha yüksek koagülasyonunu sağlar. (VÜCUT)

YÜZ TEDAVISI İÇİN 4MHZ HIFU




4MHz HIFU, daha ince nesnelere ultrason enerjisinin daha yüksek çözünürlüğünü verir. (FACE)


Tedaviden önce

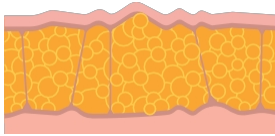


Tedaviden sonra

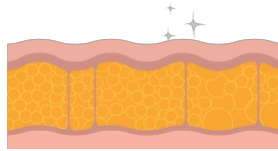

HIFU (Yağ hücrelerinin eritilmesi)

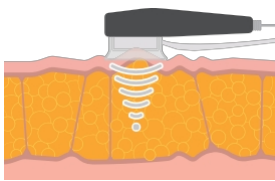

Vakum (Drenaj)

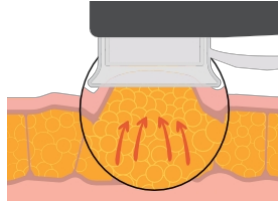

Vakum sinerji etkisi

- Hassas hedefleme, Lenfatik sistemi aktive eder, Drenaj

2 SEANSTAN SONRA 4 MHZ



Önce

Sonra


HER BİR KARTUŞUN ETKİLERİ

1,5 mm	Epidermis	LV. 1~10	Akne, Gözenekler, Kırışıklıkların iyileştirilmesi, Renk
3.0mm	Dermis	LV. 1~10	Lifting, Kaşlar, Nazolabial
4,5 mm	SMAS	LV. 1~10	Yüz sıkılaştırma, İyileştirme
7.0mm	Deri altı	LV. 1~10	Esneklik
13mm	Deri altı	LV. 1~20	Kol, Uyluk, Kalça
			Göbek, Uyluk, Deri Altı Yağları Azaltma

ÖZELLİKLER

Ağırlık	31kg
Aralık	1.0 / 1.5 / 2.0 / 3.0mm
Uzunluk	Tam / Yarım
4.3MHz Kartuş	1.5 / 3.0 / 4.5mm
2MHz Kartuş	7.0 / 13.0mm
Boyutlar	600 × 400 × 1170mm
Güç	AC 110~240V, 50/60Hz, 20VA

CİLT VE VÜCUT BAKIMI TEDAVİ ALANI

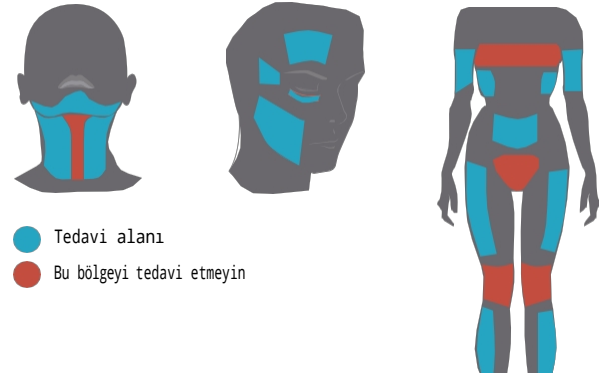

● Tedavi alanı

● Bu bölgeyi tedavi etmeyin

1 OTURUMDAN SONRA 2 MHZ



Önce

Sonra

(-2,6
cm)